




| FOOT PRINT OF TECHNOLOGY |

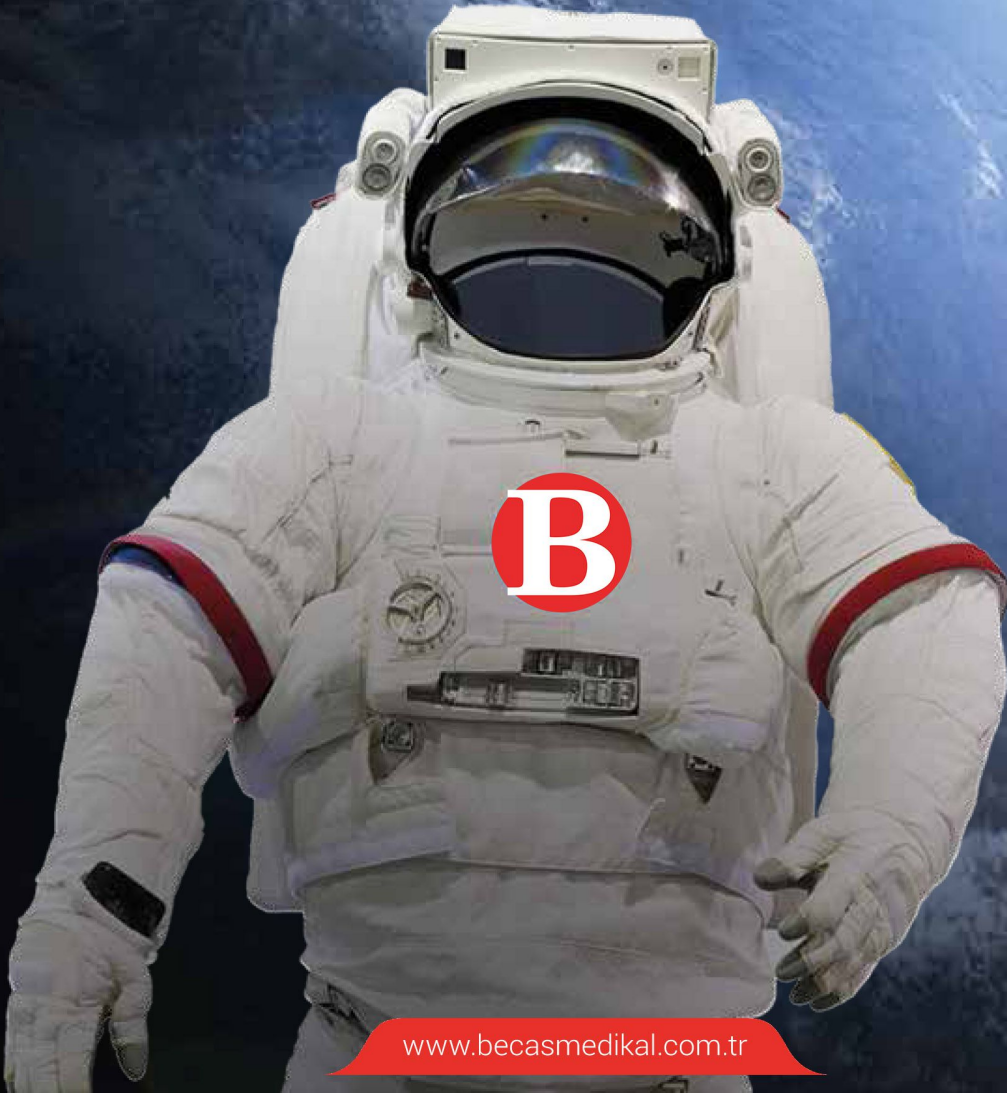

www.becasmedikal.com.tr

Beight DIODE LASER



35 DAKİKA
İŞLEM SÜRESİ



-3°C
BUZ BAŞLIK



4 MEVSİM
KULLANIM



1 SANİYEDE
10 ATIŞ



STERİLİZASYON
ÖZELLİĞİ



DOKUNMATİK
EKRAN



ACİL DURUM
BUTONU



B-EIGHT DIODE LASER




B-eight Diode ütüleme lazer epilasyon 2015 yılında ülkemizde marka oldu ve lazer epilasyon uygulamaları başka bir boyuta taşındı. Gördüğü talep ile aradan geçen yıllarda B-eight cihazı çok popüler oldu, artık orjinal ütüleme epilasyon teknolojisi ile yaz aylarında durmak yok, dört mevsim lazer epilasyon yaptırılabilir.

Kontak soğutması diğer cihazların aksine - 3°C'ye kadar soğutup, başlığı uygulama esnasında buz tutacak kıvama kadar geliyor.

Acısız ve ağrısız olması işte buradan geliyor. Tedavi seans süreleri artık tüm vücut için ortalama 35 dakika sürüyor çünkü saniyede 10 atış yapıyor ve uygulama başlığının spot size 12x12. Patentli sterilasyon teknolojisi ise hastalık bulaşma riskini ortadan kaldırıyor.

B-EIGHT DIODE LASER

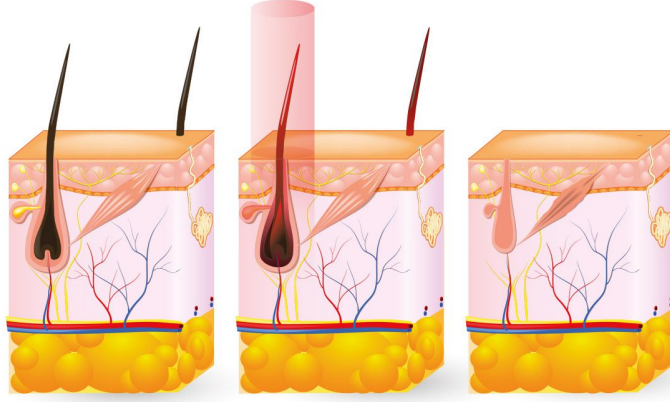

Uygulama Öncesi

Uygulama Sonrası

Saniyede 10 atış yapan ve başlık ucundaki soğutucusunun eksi 3°C'ye kadar inen rakipsiz bir teknoloji. Ütülleme Epilasyon bir ayrıcalıktır ve B-eight Diod Lazer sistemide bu ayrıcalığın bir numaralı markasıdır..



- 8 inc'lik Dik Dokunmatik ekran özelliğine sahip olan Beight hızlı ve rahat kullanım imkanı sağlar.
- 808 Nanometre Amerikan Diode başlığına sahip olup, 10 Hz hızında, Peltiel ve Klimatik soğutma sistemi ile hızlı ve güvenli uygulama sağlar.

B-EIGHT DIODE LASER



- * Beight teknolojisi sizlere 4 mevsim kullanım kolaylığı sunmaktadır.
- * Saniyede 10 atışa çıkma imkanı sağlayan Beight acısız ve ağrısız konforlu bir uygulama sunar.
- B-eight diode lazerin dünyada sadece kendisine patentli sterilizasyon özelliği ile tüm mikroorganizmaların her türlü canlı formundan temizlenmesini sağlamaktadır.
- 3 adet Hazır uygulama programına sahip Beight, seçtiğiniz birli ikili veya üçlü atışlarda atış sayısı kadar uygulama yapar ve durur.
- Uluslararası tecrübemiz ile 2017 ihracat 1. Beight diode lazer cihazımız ülkemizi dünya arenasında da temsil etmektedir.

Model	Beight
Lazer Tipi	DIODE LAZER(Ütüleme)
Güç	600 WATT
Dalga Boyu	808 nm
Spot Alan	12 x 12 mm
Ekran Ölçüsü	8" Dokunmatik Ekran
Başlık Soğutma	Peltier Soğutma
Cihaz Soğutma	Klimatik Su Soğutma
Çalışma Voltajı	220V / 15A max 50/60 Hz
Enerji SHR	12J /cm ²
Frekans	1-10 Hz

* Kozmetik CE belgesi

Kalite Belgelerimiz;
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
ISO 10002:2014
BS OHSAS 18001:2007



B8 PLATINUM DIODE LASER



- 10°C
BUZ BAŞLIK



4 MEVSİM
KULLANIM



1 SANİYEDE
10 ATIŞ



STERİLİZASYON
ÖZELLİĞİ



ACİL DURUM
BUTONU



35 DAKİKA
İŞLEM SÜRESİ



DOKUNMATİK
EKRAN



GÜNCELLENMİŞ
YENİ YAZILIM



KADIN VE ERKEKLERE
ÖZEL UYGULAMA



Diode lazer teknolojisinde geline en son nokta, adeta bir devrim:
“B-Eight Platinum”

B8 PLATINUM DIODE LASER

- -10° Buz Başlık
- Güncellenmiş Yeni Yazılım ile Kadın ve Erkekler Özel Uygulama İmkani
- 4 Mevsim Kullanım
- Dünyada Kendi Başlığını Sterilize Edebilen Tek Cihaz
- 1 Saniyede 10 Atış ile Ütüleme Sistem
- 35 Dakika İşlem Süresi
- 10,4" Dokunmatik Ekran
- Acil Durum Butonu
- 808 nm Amerikan Diode Başlık
- 20 Milyon Atış İmkani
- 12x12 Safir Başlık
- 4-6 Seansa Mükemmel Sonuç
- 2014-30 ve 2014-35 CE Kodları ile İzinli Kullanım



AURORA X2



VAKUM TEKNOLOJİSİ



3 BAŞLIK SEÇENEĞİ



MULTI POLAR ÖZELLİĞİ



4 MEVSİM KULLANIM



KOLAY TEMİZLEME



Multi-polar RF enerjisi, kutanöz ve deri altı dokularda yönlü olarak kontrol edilen elektrik alanları yaratarak yağ dokusuna geri döndürülemez termal hasar meydana getirme özelliğine sahiptir.

RF'nin ısıtma etkisi artmış mikrosirkülasyona, dolayısıyla yağ dokusunda kan akışını artırır, böylece dokunun metabolizmasını artırır, alt deri yağ homojenleştirir.

AURORA X2



Vakum Teknolojisi

Vakum emişinin fiziksel olarak iletilen basınç ve gerdirme etkisi bölmeleri rahatlatır ve dolaşımı artırır ve bu etkileri alt dermal alanın derinlerine uzatır ve SEPTA'nın yeniden yapılandırılmasına neden olur.

Teknik Özellikler

Güç	400w
Radio Frequency	0.8 MHz (Multi-polar RF)
Vakum Menzili	318mmHg
Ölçüleri (WxDxH mm)	320 x 451 x 330
Ağırlık	8.5 Kg
Elektriksel gereksinim	220/260 50-60hz





SUYLA GELEN TEMİZLİK VE BAKIM



RADYOFREKANS ÖZELLİĞİ



ULTRASONOGRAFİK BAŞLIK



MULTIPOLAR ÖZELLİĞİ



OXYGENEO ÖZELLİĞİ



İĞNESİZ MEZOTERAPİ



OTOMATİK TEMİZLEME



3 FARKLI SOLÜSYON ÖZELLİĞİ





- Hydra - başlıklarla birlikte kullanılan 4 ayrı solüsyon ile her cilt tipinde derinlemesine temizlik, peeling ve el değdirmeden siyah nokta temizliği yapılabilmektedir.
- Cihaz kendi kendisini temizleyebilme özelliği ile sektörde ki cihazlardan ayrılmaktadır.
- Quapolar - Multipolar Radyofrekans başlık ile cilt yenileme ve ürün penetrasyonu sağlar.
- U-Cosmo - 2 farklı ultrasonografik başlık hücre aktivitesini artırma ve cilt ihtiyacına yönelik serumların cilt altına derinlemesine iletilmesini sağlar.
- Led terapi sayesinde kolajen ve elastin sitimülasyonu sağlanır.
- Ve sadece bu cihazda bulunan Gemeo kapsül uygulama tekniği ile cilt lekeleri ve kırışıklarda anında gözle görülür sonuç sağlar, cildin oksijenlenmesi artırılır. Çok ayrıcalıklı ve kişiye özel yapılan bir uygulamadır.
- Neo Massage özelliği sayesinde mikro sirkülasyonun hızlandırılmasını sağlar.

OXYGENEO ÖZELLİĞİ

ULTRASONOGRAFİK BAŞLIK



MULTIPOLAR RF BAŞLIK

HYDRAFACIAL BAŞLIK




B-Hydra Teknik Özellikleri

Ürün türü:	FQ978-1
Boyutları:	47cmx40x105cm
Renk:	Beyaz, Altın
Net ağırlık:	20kg
Çıkış voltajı:	100-240 VAC 50/60 HZ
Çıkış gücü:	50VA
Ekipman güvenlik sınıfı:	I sınıf BF tip
Solüsyon:	14 Farklı Seçenek
Başlık Seçeneği:	4 Farklı Seçenek




YÜKSEK YOĞUNLUKLA ODAKLANMIŞ ULTRASON

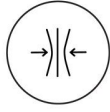

CİLT ELASTİKİYETİNİ ARTTIRMA



CİLT SIKILAŞTIRMA

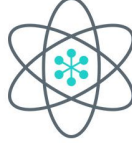

CİLT GENÇLEŞTİRME



KIRIŞIKLIK AZALTMA



CİLT ALTI 4.5MM DERİNLİĞE İNEBİLME




TEDAVİ EDİCİ BAŞLIKLAR



EL PROBU



- Cilt gençleştirmede kullanılan lazerler cildin belli bir derinliğinin altına inemezler.
- Fokuslu ultrason tedavisi cildin 4.5mm altındaki fasya dokusuna ulaşır.
- Lazer ve Radyofrekans cihazları cildin bu kadar derinine inemez.
- Fasya dokusu cilt germe operasyonlarında cildi toparlamak için müdahale edilen bir bölgedir.
- Fokuslu ultrason tedavisi cildin altına odaklanarak fasya dokusunu küçülten ısı alanları oluşturur.
- Fasyadaki küçülme nedeniyle işlemden hemen sonra cildin sarkmış alanlarında toparlanma gözlenir.
- Fokuslu ultrason ayrıca cilt altında 3 mm ye inebildiği için ciltteki kolejeni artırarak işlemden sonra ciltteki toparlanma artışı devam ederek üçüncü ayın sonunda maksimuma ulaşır

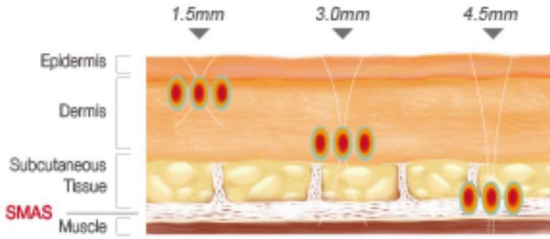

Öncesi



Sonrası



B-hifu

ile Tek İşlem Sonucudur

B-Hifu Teknik Özellikleri

Boyutları:	40cmx60cmx40cm
Renk:	Beyaz
Net ağırlık:	25kg
Enerji Tipi:	B-Hifu
Frekans:	3.2MHz
Tedavi Derinliği:	3.0mm, 4.5mm
Güç:	AC220V 50HZ, AC110V 60HZ
Enerji Yoğunluğu:	0.2-1.8J/cm2
Mesafe:	1.2/1.5/1.8mm



Kendisi Küçük, Yetenekleri Çok Büyük “NPM Hairup”




SAÇ SİMÜLASYONUNDA
PATENTLİ ROLLER SİSTEM



MEDİKAL PİGMENTASYON



KALICI MAKYAJ VE
DÖVME SİLME

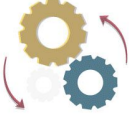

TEK CİHAZ İLE
ÇOK İŞLEM



DOKUNMATİK
EKRAN



DERMAPEN



İŞLEME ÖZEL
AMPER AYARI





MERKEZ OFİS

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 56 Balcon İş Merkezi Kat: 7 Küçükçekmece - İstanbul

Telefon : +90 (212) 885 99 99 | Gsm : +90 (532) 422 92 82

ÜRETİM

Halkalı Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi No:50/A Küçükçekmece - İstanbul

Telefon : +90 (532) 422 92 82

